


肩部ハーネスストラップガイド 取付・取扱説明書

ART NOS. HW100-150, HW100-200, HW105S, HW105L

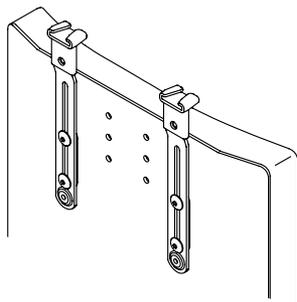

この説明書にはBodypointのすべての肩部ハーネスストラップガイドの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、使い方が確実に理解されるようにしてください。

⚠ 警告! 製品は有資格のリハビリ技師が取付け、固定してください。

本製品は取付け位置決めハーネスの取付けを意図しています。輸送用安全装置としての使用は意図していません。

⚠ 警告! 本製品は車椅子または作業椅子に座っている人の位置決めのみ使用してください。輸送用安全装置、個人用拘束装置としての使用、または故障が傷害を招く可能性のあるその他の適応での使用は意図

していません。本製品の誤用は認可されず、危険です。


保証: この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。

Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、www.bodypoint.comをご覧ください。

パッケージの内容

パッケージは以下を一つ以上を含む場合があります。

- ・ ストラップガイド、長さ150mmまたは200mm、ファスナー付き
- ・ ファスナー付き取付けアダプタ
- ・ 固定具付取付アダプター小 (185mm) または大 (幅270mm)

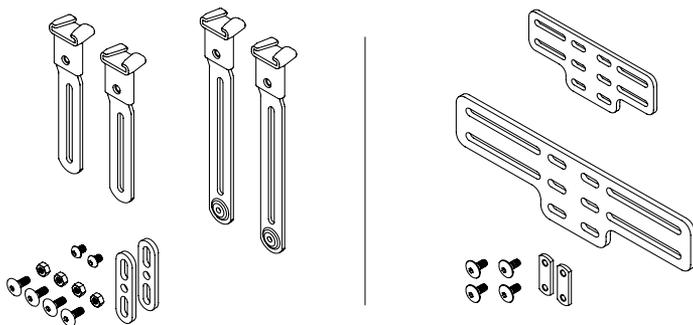


BP Bodypoint®

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CE

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

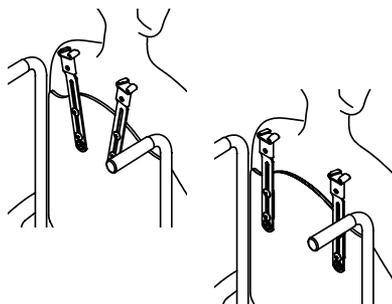


取付け要件

最大厚さ 4mm (5/32") の金属またはプラスチック製の固い背もたれ付き車椅子。厚めの背もたれには最低 90kg (200lb) の引抜き強度のある長めの取付けねじが必要です (同梱されていません)。

位置決め

使用者に車椅子に座ってもらい、骨盤支持ベルトで姿勢を正します。ストラップを頸部と肩関節の間に、肩の高さ程度の位置にします。(圧力配分により上下を調整します) 使用者のニーズに基づいてストラップガイドの最善の向きを決めてください。

取付け - ストラップガイドのみ

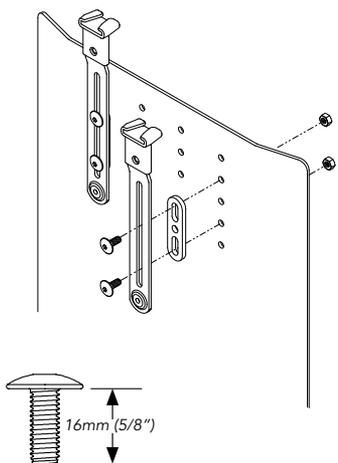


5/32" (4mm)

13 NM MAX
(115 lbf-in)

取付け - 取付けアダプタ付き


1. 12mm (1/2") ねじとナットプレートを使ってストラップガイドを取付けアダプタに装着します。
2. ヘッドレスト受けとそのねじ、またはその他の適切な固定具を使って取付けアダプタをシートに装着します。(同梱されていません。)

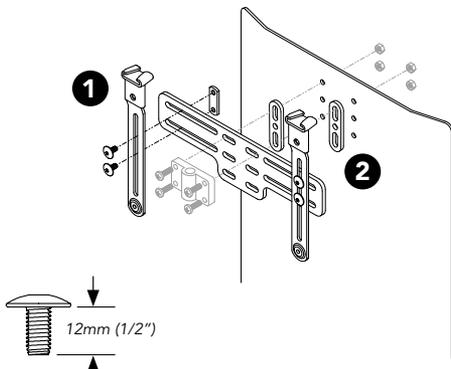


5/32" (4mm)

13 NM MAX
(115 lbf-in)


肩部ハーネスを装着します。

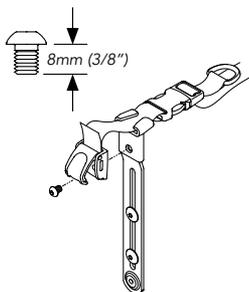


フロントブル

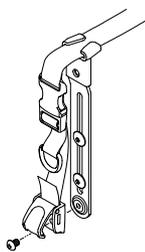

リアブル

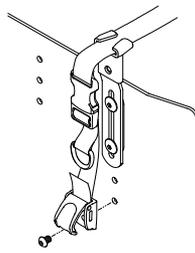

150mm ストラップガイド
ド付きリアブル

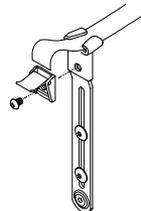

カムバックル