



#### パッケージの内容

パッケージは以下の一つ以上を含む場合があります。

- ・ Aeromesh®速乾入浴介助ベルト
- ・ グロメット付き取付けストラップ、または
- ・ スライドアジャスタ付き取付けストラップ
- ・ オプション: フレームクランプ (物品番号HW310)、
- ・ バンドクランプ (物品番号HW320)、ノブ
- (物品番号FA812-BP)

#### 位置決め

使用者にシャワー椅子/椅子型室内用便器に座ってもらい、姿勢を正します。ベルトの所望の位置を決めます。位置を選ぶ際は、他の装置の妨害を考慮してください。頸部圧迫や体幹部の不自由の危険性を減らすために、ベルトは高すぎても低すぎてもいけません。

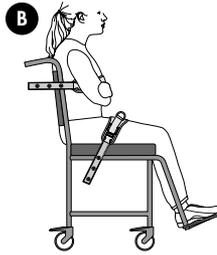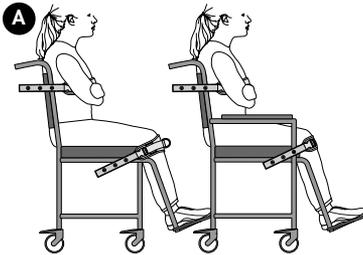

#### 取付け提案事項




##### A 胸部、膝部 (好適)

使用者のニーズを考慮して、図示の好適な位置の一つにベルトを取付けることのできる車椅子での適切な取付け箇所を見つけます。

##### B 大腿部 (オプション)

##### C 角度可変椅子

ベルトは、基点より上の上部フレームに取付けてください。基点より下にベルトを取付けると、ベルトの張力を妨害したり影響を及ぼしたりする可能性があります。

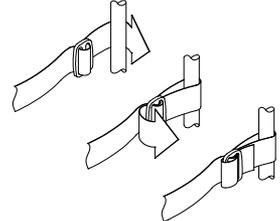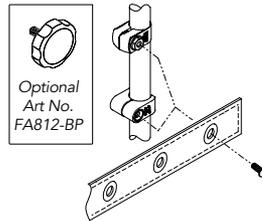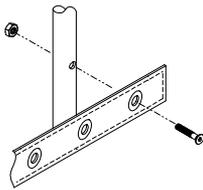


#### 取付け

フレームクランプまたはバンドクランプ付きクランプを所望の位置でシャワー椅子/椅子型室内用便器に装着し、定位置で締めます。ベルトの上とクランプの中に二番目のねじをグロメットを通じて挿入します。しっかりと締めます。

#### 直接ネジ取付け

椅子のフレームや固いシート/背に直接取付ける場合は、6mm (1/4-20インチ) の平頭ねじやボタン頭ねじを使用してください。取付けねじには最低90kg (200ポンド) の引抜き強度がなければなりません。同梱されていません。

#### スライドアジャスタとの取付け

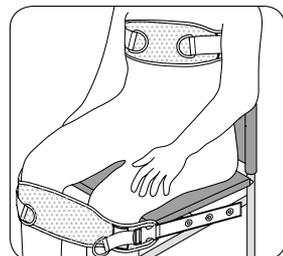

#### 調節

使用者に適正に座ってもらい、ベルトの適合度を確認します - 使用者が安全なように快適にしてください。適合度を少し調節するには、Dリングを使用してストラップを締めます。適合度を大きく調節するには、取付けストラップを使用します。

#### 安全点検

椅子に適正に配置したら、使用者に前方や左右交互に傾いてもらい、固定を確認します。確認事項:

1. バックルや調節ストラップの正常な動作。
2. 快適度 - 刺激のある領域がないか探します。
3. 位置 - 高すぎたり低すぎたりすれば、締め具取付け位置を調節します。
4. 他の装置の妨害 - 締め具取付け位置が必要に応じて定め直します。
5. 傾き、折畳み、巻上げ等、あらゆる範囲の動きを通じて椅子を動かします。何か妨害物がないか確認します。