


じぶんの VARILITE カタチに なるクッション

姿勢保持と体圧分散の両立

じぶんのカタチになるから 01 体圧分散

体とクッションをフィットさせ接触面積を増やすことで、クッション全体で体重を支え、座圧をほぼ均等に分散します。

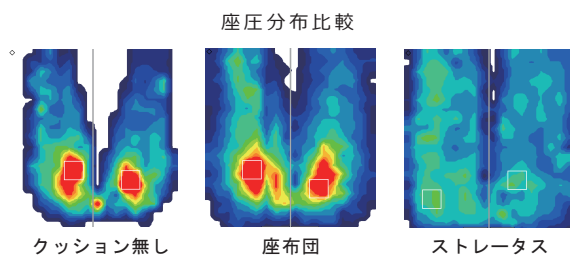

じぶんのカタチになるから 02 姿勢保持

骨盤から大腿部を優しくサポートし、安定した座り心地。前ずれや余分な筋緊張を防ぎます。



もうひとつ大切なこと

エア+フォームだから 03 振動吸収

車いすでアスファルトの上を走ったり、車で長時間のドライブをすると、どっと疲労感を覚えます。これは、路面からの振動が骨盤から脊柱に伝わり脳を揺らすからと言われています。

バリライトクッションは路面からの振動を吸収し、お身体への負担を軽減します。
(2000年 北米リハビリテーション技術学会)



洗える

カバーも本体もジャブジャブ洗えるので、いつでも清潔。失禁カバーと本体は水分を通さないので失禁対策もバッチリです。



長く使える

バリライトを製造するカスケードデザインはアウトドア製品も作るメーカー。過酷な状況でも使用に耐えられる高い技術が、バリライトにも生かされています。



軽い

バリライトクッションのリフレックスは約700gで超軽量。毎日使うから、ぜひ軽いクッションを。

2年

2年保証

バリライトクッションの本体はご購入日から2年間の保証が付きます。

VARILITE


バリライトは、世界屈指のアウトドアメーカーであるカスケードデザイン社のメディカル部門ブランド。
世界中のフィールドで培った経験と、専門家たちの技術を結集した最高峰の車いす用クッションです。



バリライトの技術と製品構造


エアとフォームのハイブリット

空気を含ませたウレタンフォームを特殊ストレッチ生地に熱圧着し、密封しています。中の空気量を調整しユーザーの体にフィットさせることで、エアとフォーム双方の素材の特性を活かすことができます。

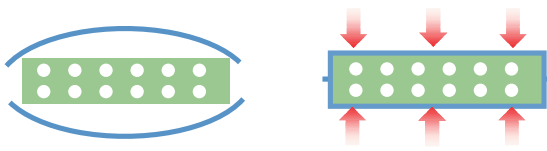

エアフォームフローテーション

硬さの違うウレタンフォームを複数組み合わせています。坐骨周辺などの床ずれが生じやすい箇所には柔らかい素材を、体を支える部分や内転を防止するポメルにはしっかりとした素材を使用し、体圧分散と姿勢保持の両立を可能にしています。

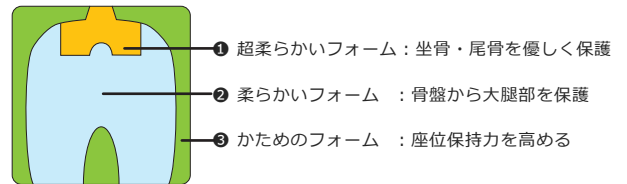

豊富なサイズ展開

こどもから大柄な方まで

小さいサイズから大きいサイズまで、幅広く取り揃えております。




調整の道具は不要です

もちろんポンプも不要です

バルブを開ければ自動的にクッションが膨らんで空気が入ります。



自分のカタチになる仕組み

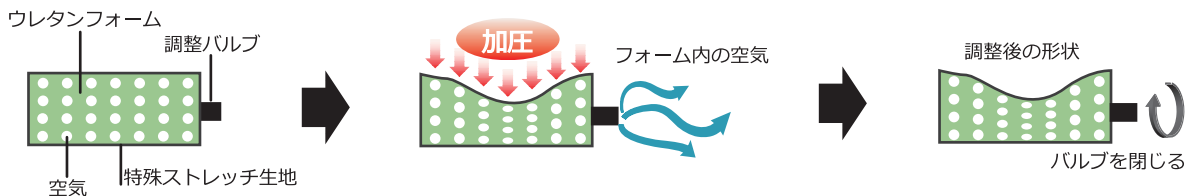

バリライト日本総代理店

株式会社ユーキ・トレーディング
福祉機器事業部
〒110-0008
東京都台東区池之端2-5-46
TEL: 03-3821-7331
FAX: 03-3821-7552



お問い合わせ先